


Posteriores

Superiores e Inferiores

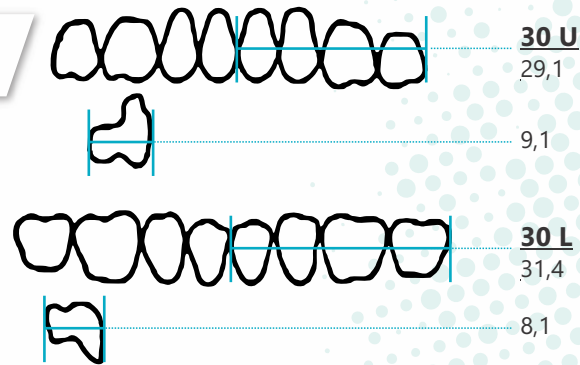

30 U

29,5

9,1

30 L

31,4

8,1



32 U

31,0

9,5

32 L

33,1

8,8



34 U

33,0

10,2

34 L

35,3

9,3



36 U

34,8

10,9

36 L

37,3

9,9



Escala de Cores



EURODENT

Dentes acrílicos de três camadas

"Com design de face menor, o Eurodent, nosso dente de três camadas, preserva a resistência flexional sem a necessidade de desgastes. Seu ajuste preciso e o encaixe na parte traseira dos dentes posteriores garantem melhor distribuição da força, reduzindo ainda mais os ajustes e eliminando a necessidade de retenções, assegurando segurança e durabilidade excepcionais"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- » Dentes fabricados em resina acrílica com tripla prensagem
- » Alta resistência e totalmente livre de bolhas e porosidade
- » Cores estáveis
- » Biocompatibilidade de pigmentos e fluorescência natural
- » Maior resistência ao desgaste natural e a impactos causados pela mastigação
- » Maior retenção do brilho.

COMPOSIÇÃO

PMMA
EGDMA (crosslink)
Silicone
Fluorescente
Pigmentos Biocompatíveis

REGISTRO ANVISA Nº 80772730002

REAW Ind. e Com. de Produtos Odontológicos Ltda.

CNPJ 11.959.613/0001-77 - Ins. Est. 536.147.558.110

R. Octávio de Freitas Filho, 350 - Polo Industrial - CEP 13632-622

Pirassununga-SP - Fone 19 3565-0483 | 3563-4889



triunfodents

www.dentetriunfo.com.br



CATÁLOGO DE FORMAS

EURODENT

Dentes acrílicos de três camadas



Anteriores
Superiores



T 42

42,4
9,6
8,0

T 44

45,1
10,5
8,2

T 45

45,7
11,3
8,4

T 46

46,5
10,7
8,7

T 49

49,6
12,2
9,1

O 43

44,2
10,5
8,3

O 47

48,1
11,4
9,1

O 51

52,2
12,4
9,8

R 45

45,0
10,6
8,2

R 46

46,5
10,1
8,8

R 47

47,5
11,5
8,8

R 48

48,8
13,0
9,3

R 49

48,7
10,9
9,3

S 43

43,9
9,6
8,2

S 44

44,5
10,4
8,3


S 48

49,0
11,3
9,1

S 50

51,0
11,8
9,6

Anteriores
Inferiores

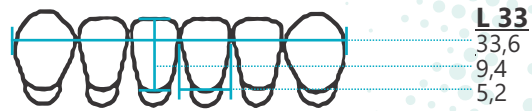

L 33

33,6
9,4
5,2

L 35

34,6
9,5
5,4

L 36

35,6
9,1
5,5

L 38

36,6
10,5
5,8

L 39

38,3
10,8
5,9

Articulação			
ANTERIOR (SUPERIOR)	T42	L33	30+32
	T44	L33+L35	30+32
	T45	L33+L35+L36	32+34
	T46	L35+L36+L38	32+34
	T49	L38+L39	36
	O43	L33+L35+L36	30+32
	O47	L38+L39	34
	O51	L38+L39	36
	R45	L33+L35	32
	R46	L33+L35+L36	32+34
	R47	L38+L39	34
	R48	L36+L38	34
	R49	L38+L39	34+36
	S43	L33+L35+L36	30+32
ANTERIOR (INFERIOR)	S44	L33+L35+L36+L38	30+32+34
	S48	L38+L39	34+36
	S50	L38+L39	36
POSTERIOR			

Formato do dente de acordo com biotipo

- Oval

Quadrado

Triangular

Retangular

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



FINALIDADE

Dentes de polímero sintético para uso profissional odontológico, indicado para confecção de próteses dentárias total ou parcial, fixa ou removível, coroas e pontes temporárias.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Aparência realista. Alta estabilidade de cor. Fluorescente. Pigmentos biocompatíveis. Excelente adesão a base da prótese. Ausência de porosidade. Resistente a mancha, deformação e rachadura.

COMPOSIÇÃO

Polimetilmetacrilato (PMMA), etilenoglicoldimetacrilato (EGDMA / crosslink), silicone, pigmentos biocompatíveis e fluorescente.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

INSTRUÇÕES DE USO

Devido amplo conhecimento técnico disseminado entre profissionais de odontologia, a segurança de uso deste produto pode ser garantida sem instruções do fabricante. Adotar as práticas conhecidas para definição de modelo, cor, montagem, articulação, adesão ao polímero de base da prótese e controle de contaminantes. Para melhorar a adesão, retirar o brilho da base do dente com instrumento abrasivo. Após isolamento da mufla, recomenda-se utilizar o Removedor de Cera Triunfo para limpeza da base dos dentes e posterior aplicação do polímero de base da prótese. Consulte o catálogo de formas específico para cada família disponível no site www.dentetriunfo.com.br

ADVERTÊNCIAS

Não há efeito adverso reconhecido quando utilizado de acordo com as técnicas profissionais usuais.

PRECAUÇÕES

Para uso profissional odontológico. Utilize equipamentos de proteção individual. Recomenda-se ao paciente, realizar higienização diária sem uso de substâncias agressivas como álcalis ou ácidos.

APRESENTAÇÕES

Família: TRIUNFO DENTS

Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- Anteriores Inferiores: A25, A26, 2D, 3D 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- Posteriores Superiores e Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: REAL PLUS

Cores: Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, 60, 62, 65, 66, 67, 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: A23, A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 38, 263, 264, 266.
- Anteriores Inferiores: A25, A26, 2D, 3D, 3M, 2N, 3N, 2P, 3P, 266.
- Posteriores Superiores e Inferiores: 30M, 32M, 30L, 32L, 34L.

Família: BIONIX

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- Anteriores Superiores: T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- Anteriores Inferiores: I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- Posteriores Superiores e Inferiores: TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



Família: BIONIX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, BL1, BL2, BL3, BL4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.

Modelos (prensagem de 2 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: TRIUNFO 3C

Cores: 60, 62, 65, 66, 67 e 69.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX

Cores: 1A, 2A, 4A, 2B, 4B, 1C, 1D, 1E, 3E.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: NEW LUX V

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, BL1, BL2, BL3, BL4, C3.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T11, T12, T13, T14, T17, T31, T32, T36, T66, TE2, TE3, TE4, TF4, TG3, TH3, TH4, TL2, TL4, R4B, R21, R22, R25, R44.
- **Anteriores Inferiores:** I10, IL1, IL3, IL5, IL7, IK6, IK10, IK12.
- **Posteriores Superiores e Inferiores:** TM2, TM3, TM4, TM5, TM6.

Família: EURODENT

Cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, C3, B1, BL1, BL2, BL3, BL4.

Modelos (prensagem de 3 camadas):

- **Anteriores Superiores:** T42, T44, T45, T46, T49, O43, O47, O51, R45, R46, R47, R48, R49, S43, S44, S48, S50.
- **Anteriores Inferiores:** L33, L35, L36, L38, L39.
- **Posteriores Superiores:** 30U, 32U, 34U, 36U.
- **Posteriores Inferiores:** 30I, 32I, 34I, 36I.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 22112:2017 - Dentes Artificiais para Próteses Dentárias - Tipo 1 (Dentes Anteriores) e Tipo 2 (Dentes Posteriores)

ANVISA RDC nº 751/2022 - Dispositivo Médico - Classe II Médio Risco - Dentes Artificiais

NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº 80772730002

Produto fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Resolução ANVISA RDC nº 665/2022.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

DENTES ACRÍLICOS

Dentes artificiais

Ficha Técnica
SGQ-FT-3, revisão 4



REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.